

# StreamLine Mic

Uživatelská příručka



# Obsah

<b>Než začnete</b>	<b>5</b>
Úvod	5
Balení obsahuje	10
Součásti	12
<b>Začínáme</b>	<b>14</b>
Nabíjení	14
Párování sluchadel	16
Párování vašeho chytrého telefonu nebo hudebního přehrávače	18
Vymazání párování	21

<b>Každodenní použití</b>	<b>22</b>
Zapínání/vypínání	22
Nastavení hlasitosti	23
Ztlumení mikrofonů sluchadel	24
① Navazování telefonních hovorů	25
② Poslech hudby	29
③ Použití vzdáleného mikrofonu	31
④ Použití dálkového ovládání	34
<b>Důležité bezpečnostní informace</b>	<b>35</b>
Bezpečnost osob	35
Bezpečnost produktů	41

<b>Důležité informace</b>	<b>44</b>
Předpokládané použití	44
Přehled stavů a signálů kontrolky napájení	45
Vysvětlení symbolů	49
Údržba a péče	51
Technické informace	52
Informace týkající se likvidace	54
Informace o shodě	55

# Než začnete



## UPOZORNĚNÍ

Pečlivě si prostudujte celou uživatelskou příručku a dodržujte bezpečnostní informace v tomto dokumentu, abyste předešli škodám nebo úrazu.

## Úvod

StreamLine Mic používá Bluetooth®\* Technologie poskytující následující funkce.

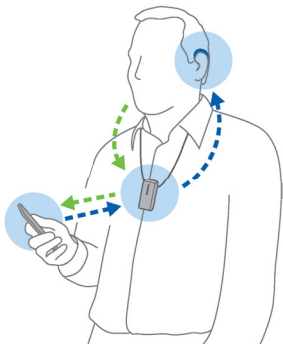
\* Vlastníkem slovní značky a loga Bluetooth je firma Bluetooth SIG, Inc. a jakékoli použití těchto značek výrobcem tohoto produktu z hlediska právních norem spadá pod licenční ujednání. Ostatní obchodní známky a obchodní názvy jsou ve vlastnictví příslušných společností.

## 1 Sluchátka pro chytré telefony

Zvuky z vašeho chytrého telefonu se budou prostřednictvím jednotky StreamLine Mic přenášet do vašich sluchadel.

Váš hlas je snímán jednotkou StreamLine Mic a odesílán do vašeho chytrého telefonu.

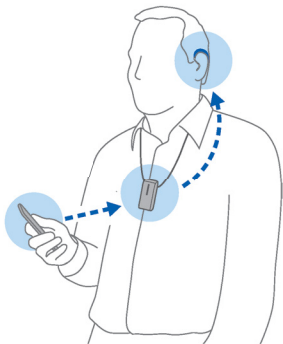
Více se můžete dočíst v kapitole „Telefonní hovory“.



## 2 Sluchátka pro hudbu

Hudba z vašeho chytrého telefonu nebo jakéhokoli jiného Bluetooth zařízení se bude prostřednictvím jednotky StreamLine Mic přenášet do vašich sluchadel.

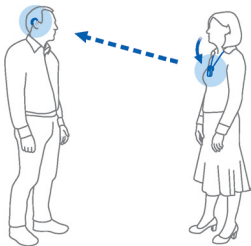
Více se můžete dočíst v kapitole „Poslech hudby“.



### 3 Vzdálený mikrofon

Zvuky z vybraného reproduktoru se budou bezdrátově přenášet z StreamLine Mic **do** vašich sluchadel.

Více se můžete dočíst v kapitole „Použití jako vzdálený mikrofon“.





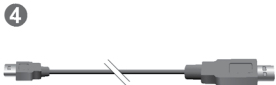
#### 4 Dálkové ovládání

Když jednotka StreamLine Mic neprovádí streaming zvuků, může se používat jako dálkové ovládání pro vaše sluchadla.




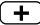
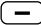
Více se můžete dočíst v kapitole „Použití jako dálkové ovládání“.

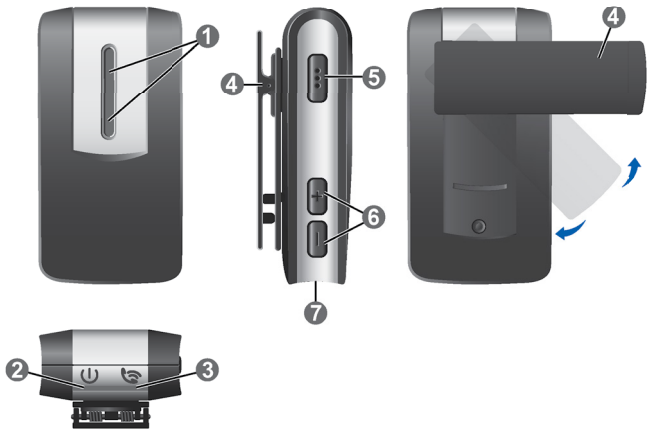
## Balení obsahuje

- 1 StreamLine Mic
- 2 Šňůrky (různé délky)
- 3 Kapsa
- 4 Kabel USB pro nabíjení
- 5 Napájecí kabel s USB a napájecí modul (specifický pro danou zemi)



## Součásti



- 1 Mikrofony
- 2 Kontrolka napájení 
- 3 Signalizace stavu 
- 4 Spona (otočná)
- 5 Multifunkční tlačítko 
- 6 Tlačítka pro nastavení hlasitosti  a 
- 7 Port USB pro nabíjení

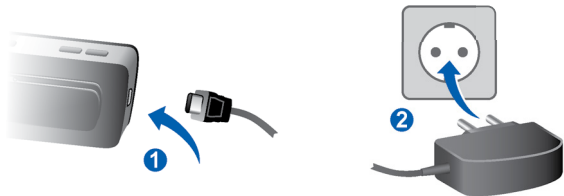


# Začínáme

## Nabíjení

Jednotka StreamLine Mic je při dodávce částečně nabitá. Před prvním použitím ji plně nabijte.

Pokud kontrolka napájení  svítí červeně , máte ještě přibližně 30 minut zbývajících doby pro streaming audiosignálu.



Kontrolka napájení ukazuje stav nabíjení:

### Popis

---



Baterie je téměř vybitá

---



Nabíjení (StreamLine Mic svítí)

---



Nabíjení (StreamLine Mic nesvítí)

---



Nabíjení je dokončeno (StreamLine Mic svítí)

---



Nabíjení je dokončeno (StreamLine Mic nesvítí)



---

Další informace:

- Plné nabití obvykle trvá 2 hodiny.
- Ujistěte se, že vidlice napájecí šňůry je snadno přístupná, abyste ji mohli v případě nutnosti vytáhnout ze zásuvky.







## Párování sluchadel

Vaše sluchadla musí být **jedenkrát** spárována s jednotkou StreamLine Mic. Párování je poté ve sluchadlech uloženo a při každém zapnutí si je pamatují.

- ▶ Ujistěte se, že je jednotka StreamLine Mic vypnutá: Podržte stisknuté tlačítko , dokud kontrolka  signalizující napájení nezhasne. To trvá přibližně 6 sekund.
- ▶ Sluchadla vypněte a znovu je zapněte. Příhrádky baterie otevřete a uzavřete. Pokud sluchadla nemají příhrádku baterie, vypněte je a zapněte je tak, jak je popsáno v uživatelské příručce pro sluchadla.







Sluchadla jsou nyní připravena pro párování.  
Na dokončení párování máte 3 minuty.

- ▶ Jednotku StreamLine Mic zapněte: Podržte stisknuté tlačítko , dokud kontrolka  signalizující napájení nezačne svítit zeleně . To trvá přibližně 3 sekundy. Kontrolka  signalizující stav bliká žlutě .
- ▶ Položte obě sluchadla do blízkosti jednotky StreamLine Mic (maximální vzdálenost 20 cm nebo 8 palců). Automaticky se spustí proces párování. Párování je dokončeno, jakmile kontrolka signalizující stav začne svítit žlutě .





## Párování vašeho chytrého telefonu nebo hudebního přehrávače

Je potřeba, aby se jednou uskutečnilo párování vašeho chytrého telefonu (nebo hudebního přehrávače) s jednotkou StreamLine Mic. Poté je spojení automaticky navazováno, kdykoli je přístroj StreamLine Mic zapnutý a nachází se v jeho provozním dosahu.

- ▶ Podržte současně stisknutá tlačítka  a , dokud kontrolka signalizující stav  nezačne blikat modře . To trvá přibližně 6 sekund.

Jednotka StreamLine Mic je nyní připravena k párování. Na dokončení párování máte 3 minuty.

- ▶ Na svém chytrém telefonu nebo hudebním přehrávači aktivujte funkci „Vyhledávání jiných zařízení s Bluetooth“.  
Viz příručka příslušného zařízení.
- ▶ Na svém chytrém telefonu nebo na hudebním přehrávači vyberte v seznamu nalezených zařízení „StreamLine Mic“.
- ▶ Až k tomu budete požádáni, zadejte PIN „0000“.






Párování je dokončeno, jakmile kontrolka signalizující stav  začne svítit modře .


## Další informace

- StreamLine Mic může být **spárována** s až osmi zařízeními s rozhraním Bluetooth. V daném okamžiku může být ale **připojeno** jen jedno zařízení.
- V případě spárování s několika zařízeními:
  - StreamLine Mic se připojí k prvnímu zařízení, které najde.
  - Pokud si budete přát přepnout na jiné zařízení, na přístroji/přístrojích, které nechcete v dané chvíli používat, deaktivujte Bluetooth.

## Vymazání párování

Pokud si přejete vymazat veškerá párování jednotky StreamLine Mic s chytrými telefony a hudebními přehrávači, postupujte následujícím způsobem:




- ▶ Jednotku StreamLine Mic vypněte: Podržte stisknuté tlačítko , dokud kontrolka  signalizující napájení nezhasne. To trvá přibližně 6 sekund.
- ▶ Stiskněte současně a podržte stisknuté tlačítko  a tlačítko  a tlačítko  po dobu 10 sekund.



Když jsou párování vymazána, kontrolka signalizující stav bliká červeně . Vaše sluchadla zůstávají spárována s jednotkou StreamLine Mic.

# Každodenní použití



## Zapínání/vypínání

Zapínání:

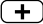
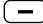
- ▶ Podržte stisknuté tlačítko , dokud kontrolka  signalizující napájení nezačne svítit zeleně . To trvá přibližně 3 sekundy.

Kontrolka  signalizující stav bliká žlutě , dokud nejsou sluchadla připojena.

Vypínání:

- ▶ Podržte stisknuté tlačítko , dokud kontrolka  signalizující napájení nezhasne. To trvá přibližně 6 sekund.

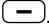
## Nastavení hlasitosti

Pokud si přejete nastavit hlasitost, krátce stiskněte tlačítko  nebo .


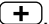
V závislosti na typu vašich sluchadel se hlasitost nastavuje následujícím způsobem:

- Možnost 1: Když probíhá streaming audiosignálu, jsou nastavovány pouze zvuky pocházející z přístroje StreamLine Mic (telefonní hovor, mluvené slovo nebo hudba). Když je streaming audiosignálu vypnutý, nastavuje se hlasitost sluchadel.
- Možnost 2: Hlasitost zvuků z přístroje StreamLine Mic (telefonní hovor, mluvené slovo nebo hudba) a hlasitost sluchadel se nastavují společně.

## Ztlumení mikrofonů sluchadel

Pokud budete chtít ztlumit mikrofony sluchadel, na dobu 3 sekundy podržte stisknuté tlačítko . Do vašich sluchadel je přehráván pouze zvuk z StreamLine Mic.

V závislosti na typu vašich sluchadel můžete zrušit ztlumení mikrofonů sluchadel, a to jedním z následujících způsobů:

- Možnost 1: Na dobu 3 sekundy podržte stisknuté tlačítko .
- Možnost 2: Krátce stiskněte tlačítko .

Může se stát, že když se přístroj StreamLine Mic používá jako dálkový mikrofon, tato funkce není k dispozici.



## 1 Navazování telefonních hovorů

Předpoklady: Jednotka StreamLine Mic musí být připojena k chytrému telefonu a musí být na správném místě.

### Správné nasazení jednotky StreamLine Mic






Aby bylo zajištěno nejlepší možné chování jednotky StreamLine Mic, měla by být nasazena, jak ukazuje obrázek. Je důležité, aby byl mikrofon jednotky StreamLine Mic obrácen směrem k vašim ústům a aby jednotka StreamLine Mic nebyla zakryta např. oblečením.



Maximální vzdálenost:


- Chytrý telefon — StreamLine Mic: 10 m (33 ft)
- Sluchadla — StreamLine Mic: 2 m (6,5 ft)

## Přijetí hovoru



Ve svých sluchadlech uslyšíte vyzváněcí tón. Kontrolka  signalizující stav bliká zeleně .

- ▶ Pokud si budete přát přijmout/ukončit hovor, krátce stiskněte tlačítko  nebo potvrďte/ukončete hovor pomocí svého chytrého telefonu.

V době, kdy hovor probíhá, kontrolka  signalizující stav svítí zeleně .


- ▶ Budete-li chtít hovor odmítnout, na dobu přibližně 3 sekundy podržte stisknuté tlačítko .

## Volání

Pokud někoho voláte pomocí svého připojeného chytrého telefonu, hovor se automaticky přenáší do vašich sluchadel. V době, kdy hovor probíhá, kontrolka  signalizující stav svítí zeleně .



Pokud se jednotka StreamLine Mic používá jako vzdálený mikrofon, tato funkce není k dispozici.

## Další informace

- **Hlasové příkazy:** Když je chytrý telefon připojen, dvojitě stiskněte tlačítko , aby se aktivovalo hlasové vytáčení (jestliže je chytrým telefonem podporováno).
- Pro tento druh spojení jednotka StreamLine Mic používá profil Bluetooth Hands-Free Profile (HFP).

## 2 Poslech hudby

Pokud je jednotka StreamLine Mic připojena k přehrávači hudby prostřednictvím Bluetooth, je hudba automaticky přehrávána do vašich sluchadel. Na jednotce StreamLine Mic není potřeba nic nastavovat.


Když probíhá streaming hudby, stavová kontrolka  svítí oranžově .

Maximální vzdálenosti:

- Přehrávač hudby — StreamLine Mic: 10 m (33 ft)
- Sluchadla — StreamLine Mic: 2 m (6,5 ft)

## Spouštění/vypínání hudby


- ▶ Pro spouštění/vypínání hudby používejte svůj chytrý telefon nebo hudební přehrávač.

Budete-li chtít vypnout hudbu, můžete také krátce stisknout tlačítko  na jednotce StreamLine Mic.

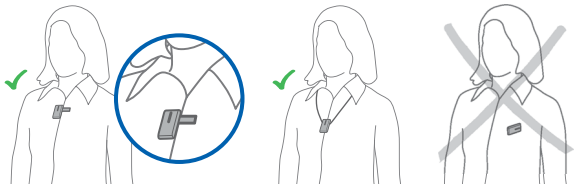
## Další informace

- Pro tento druh spojení jednotka StreamLine Mic používá profil Bluetooth Advanced Audio Distribution Profile (A2DP).
- Když je přenášena hudba z vašeho chytrého telefonu, jsou příchozí hovory v průběhu přehrávání hudby signalizovány.

### 3 Použití vzdáleného mikrofonu

Funkce vzdáleného mikrofonu se nespouští automaticky. Do režimu vzdáleného mikrofonu musíte přepnout pomocí tlačítka .

#### Správné nasazení jednotky StreamLine Mic






Aby bylo zajištěno nejlepší možné chování jednotky StreamLine Mic, reproduktor by měl být nasazen, jak ukazuje obrázek. Je důležité, aby byl mikrofon obrácen směrem k ústům mluvčího a aby jednotka StreamLine Mic nebyla zakryta např. oblečením.

Maximální vzdálenost:


- Sluchadla — StreamLine Mic: 20 m (66 ft)




### Zapnutí vzdáleného mikrofonu

- ▶ Stiskněte tlačítko  na dobu přibližně 3 sekundy. Kontrolka signalizující stav  začne svítit fialově . Ve vašich sluchadlech se ozve potvrzovací tón. Vzdálené mikrofony jsou zapnuté. Mluvené slovo od osoby mající nasazenu jednotku StreamLine Mic se přenáší přímo do vašich sluchadel.



## Vypnutí vzdáleného mikrofonu

- ▶ Na dobu přibližně 3 sekundy podržte stisknuté tlačítko .

Kontrolka signalizující stav  svítí modře   
(připojeno k chytrému telefonu) nebo žlutě   
(nepřipojeno k chytrému telefonu).

## Další informace

- Když jednotku StreamLine Mic používáte jako vzdálený mikrofon, spojení s chytrým telefonem je přerušeno. Zejména příchozí hovory nejsou nijak signalizovány.
- StreamLine Mic má směrové mikrofony, tzn. mikrofony, které zachycují zvuk přicházející z určitého směru.


## 4 Použití dálkového ovládání

Jednotka StreamLine Mic se může používat také jako dálkové ovládání pro vaše sluchadla: Můžete nastavovat hlasitost (viz kapitola „Nastavování hlasitosti“), můžete ztlumit mikrofony sluchadel (viz kapitola „Ztlumení mikrofonů sluchadel“) nebo můžete přepnout na další naslouchací program (viz níže).

Maximální vzdálenosti:

- Sluchadla — StreamLine Mic: 2 m (6,5 ft)

### Přepnutí na následující naslouchací program

► Na dobu přibližně 3 sekundy podržte stisknuté tlačítko .

Pokud se jednotka StreamLine Mic používá jako vzdálený mikrofon, tato funkce není k dispozici.

# Důležité bezpečnostní informace

## Bezpečnost osob



### VÝSTRAHA

Nebezpečí udušení!

Váš přístroj obsahuje malé součástky, které je možné spolknout.

- ▶ Sluchadla, baterie a příslušenství uchovávejte mimo dosah dětí a mentálně postižených osob.
- ▶ Jestliže byly nějaké součástky spolknuty, neprodleně vyhledejte lékaře nebo nemocnici.



## **VÝSTRAHA**

Nebezpečí uškrcení!

- ▶ Zajistěte, aby se nemohlo stát, že se šňůra někde zachytí, např. v pohybuujících se mechanických součástech strojů.
- ▶ Používejte pouze dodávanou šňůru. Pokud se do něčeho zaplete, automaticky se odpojí.
- ▶ Šňůru okolo krku nepoužívejte pro děti do dvanácti let věku.



## **VÝSTRAHA**

Nebezpečí úrazu elektrickým proudem!

- ▶ Nepoužívejte zařízení, na nichž je zřejmé, že jsou poškozená, a vraťte je na místo prodeje.



## **VÝSTRAHA**

Mějte na paměti, že neoprávněné úpravy produktu mohou mít za následek jeho poškození nebo mohou způsobit újmu na zdraví.

- ▶ Používejte jedině schválené součásti a příslušenství. Obrat'te se s prosbou o pomoc na svého foniatra.



## **VÝSTRAHA**

Bezpečnost dobíjení baterií pomocí připojení přes USB je dána příslušným externím zařízením.

- ▶ Když je konektor USB spojen s externím zařízením zapojeným do síťové zásuvky, mělo by být toto zařízení schváleno UL nebo musí splňovat požadavky normy IEC 60065, IEC 60950 nebo jiných ekvivalentních bezpečnostních norem.



## VÝSTRAHA

Bezpečnost použití tohoto přístroje, když je spojen s externím zařízením (prostřednictvím externího vstupního kabelu, kabelu USB nebo přímo), je dána tímto externím zařízením.

- ▶ Když je spojeno s externím zařízením zapojeným do síťové zásuvky, musí toto zařízení splňovat požadavky normy IEC 60065, IEC 60950 nebo jiných ekvivalentních bezpečnostních norem.



## VÝSTRAHA

V případě, že se s dobíjitelnou baterií zachází nesprávně, hrozí nebezpečí výbuchu.

- ▶ Dobíjitelné baterie nesmí být zkratovány, proraženy, rozdrceny nebo rozebírány.
- ▶ Neodhazujte je do kamen nebo do ohně.
- ▶ Zařízení nesmí být ponořeno do vody.
- ▶ Dobíjitelnou baterii dobíjejte při teplotě v rozmezí 0°C až 45°C.
- ▶ Pokud si přejete opravit nebo vyměnit dobíjitelnou baterii, vraťte přístroj svému foniatrovi.



## **VÝSTRAHA**

Aktivní implantáty

- ▶ Ve spojení s aktivními implantáty je nutno dávat pozor. Pokud máte aktivní implantát, obraťte se na výrobce daného implantovaného zařízení a vyžádejte si informace týkající se nebezpečí rušení.



## **VÝSTRAHA**

Toto zařízení může způsobovat rušení měřicích a elektronických zařízení.

- ▶ Svůj přístroj nepoužívejte v letadlech nebo v oblastech, kde se používají citlivá zařízení nebo elektronická zařízení na podporu života.





## **VÝSTRAHA**

Nebezpečí výbuchu!

- ▶ Své přístroje nepoužívejte v prostorech, kde by se mohly vyskytnout výbušné plyny (např. v oblastech dolování).

## **Bezpečnost produktů**



### **POZNÁMKA**

- ▶ Chraňte své přístroje před extrémním horkem. Nevystavujte je přímému slunečnímu záření.



### **POZNÁMKA**

- ▶ Chraňte své přístroje před vysokou vlhkostí.



## **POZNÁMKA**

- ▶ Nesušte své přístroje v mikrovlnné troubě.



## **POZNÁMKA**

Různé typy silného záření, např. v průběhu rentgenových nebo MRI vyšetření hlavy, mohou zařízení poškodit.

- ▶ V průběhu těchto nebo podobných procedur přístroje nepoužívejte.

Slabší záření, např. od vysokofrekvenčních zařízení nebo bezpečnostních zařízení na letištích, přístroje nepoškozuje.



V některých zemích existují omezení týkající se používání bezdrátových zařízení.

- ▶ Pokud budete potřebovat další informace, obraťte se na místní úřady.



### **POZNÁMKA**

Vaše zařízení jsou konstruována tak, aby vyhovovala mezinárodním normám, jež se týkají elektromagnetické slučitelnosti; přesto by se však mohlo vyskytnout rušení elektronických přístrojů v jejich blízkosti. V takovém případě se musíte vzdálit od zdrojů rušení.

# Důležité informace

## Předpokládané použití

Toto zařízení má sloužit jako bezdrátový přijímač (receiver) a vysílač zvuku mezi sluchadly a okolním prostředím, včetně mluveného slova a bezdrátových audiozařízení.

Toto zařízení umožňuje uživateli bezdrátových sluchadel také ovládat jejich funkce.


Je konstruováno tak, aby mohlo být používáno dětmi (> 36 měsíců) a dospělými ve spojení s jejich sluchadly.

# Přehled stavů a signálů kontrolky napájení


## Signalizace stavu

### Popis

---

 Bliká žlutě  
Vyhledávání sluchadel.

---

 Žlutá  
Režim bez aktivity Připojeno ke sluchadlům.  
**Nepřipojeno** k chytrému telefonu nebo jinému  
zařízení.

---



## Popis

---



Bliká modře

StreamLine Mic je viditelný pro chytrý telefon pro účely párování.

---



Modrá

Režim telefonu: Připojeno k chytrému telefonu.

---



Bliká zeleně

Příchozí hovor.

---



Zelená

Probíhající hovor.

---



Oranžová

Streaming hudby.


---

## **Popis**

---

 Fialová  
Režim vzdáleného mikrofonu.

---


 Bliká fialově  
Opětovné připojování vzdáleného mikrofonu.

---


## **Kontrolka napájení**

### **Popis**

---

 Červená  
Baterie je téměř vybitá.


---

 Bliká zeleně  
Nabíjení, když je jednotka zapnutá.


---

## Popis


---

 Slábnoucí zelená  
Nabíjení je dokončeno a jednotka StreamLine Mic je zapnutá.


---

 Zelená  
Zapnuto, nenabíjí se.

---

 Bliká oranžově  
Nabíjení, když je jednotka vypnutá.

---

 Oranžová  
Nabíjení je dokončeno a jednotka StreamLine Mic je vypnutá.

---



## Vysvětlení symbolů

### Symbole použité v tomto dokumentu

---



Poukazuje na situaci, která by mohla mít za následek vážná, střední nebo lehká ublížení na zdraví.

---



Upozorňuje na hrozící hmotné škody.

---



Rady a tipy, jak se zařízením zacházet co možno nejlépe.

---

### Symbole na sluchadle nebo na obalu

---



Štítek o shodě s CE, potvrzuje shodu s určitými evropskými směrnici, viz kapitola „Informace o shodě“.

---

## Symbole na sluchadle nebo na obalu

---



Štítek s údaji o EMC a o splnění požadavků pro vysokofrekvenční komunikaci pro Austrálii, viz kapitola „Informace o shodě“.

---



Označení výrobce přístroje z hlediska právních norem.

---



Nelikvidujte přístroj v rámci směsného komunálního odpadu. Více se můžete dočíst v kapitole: „Informace týkající se likvidace“.

---



Prostudujte si pokyny v této uživatelské příručce a postupujte podle nich.

---

## Údržba a péče



### POZNÁMKA

- ▶ Vaše zařízení se nesmí dostat do vody!
- ▶ Pro čištění svého zařízení nepoužívejte alkohol ani benzín.
- ▶ Kdykoli je potřeba, jednotku očistěte měkkým hadříkem.
- ▶ Nepoužívejte abrazivní čisticí kapaliny s přísadami, jako je kyselina citrónová, čpavek atd.



## Technické informace

### Kompatibilní sluchadla

StreamLine Mic pracuje s našimi specifickými bezdrátovými sluchadly. Informace o kompatibilních modelech vám poskytne váš foniatr.

### Podmínky pro provoz, přepravu a skladování

#### Provozní podmínky

---

Teplota	5 až 40°C (41 až 104°F)
Relativní vlhkost	15 až 93%, bez kondenzace

---

V průběhu déletrvajících časových intervalů pro přepravu a skladování dodržujte prosím následující podmínky:

## Přeprava a skladování

---

Teplota -20 až 70°C (-4 až 158°F)

---



### **VÝSTRAHA**

Nebezpečí úrazu, požáru nebo výbuchu během přepravy.

- ▶ Při přepravě StreamLine Mic si počínejte v souladu s místními předpisy.

Na jiné součásti, jako jsou baterie, se mohou vztahovat jiné podmínky.

## Technické údaje týkající se napájení

Vstupní napětí:	100-240 V~
Vstupní proud:	max. 0,2 A při 100 V~
Vstupní frekvence:	47-63 Hz
Výstupní napětí:	5 V=
Výstupní proud:	max. 1 A

## Informace týkající se likvidace

Přístroje, příslušenství a obaly recyklujte s souladu s předpisy platnými v místě použití.

## **Informace o shodě**

Značka CE znamená, že je zařízení ve shodě s následujícími evropskými směrnici:

- 93/42/EEC týkající se zdravotnických prostředků
- 2014/53/EU RED týkající se vysokofrekvenčních zařízení
- 2011/65/EU RoHS týkající se omezení nebezpečných látek

Plné znění prohlášení o shodě si můžete stáhnout na stránkách [www.signia-hearing.com/doc](http://www.signia-hearing.com/doc).


## **Bezdrátové ovládání**

Tento přístroj obsahuje vysokofrekvenční transceiver využívající Bluetooth EDR, Bluetooth low energy (BLE) a patentovanou vysokofrekvenční technologii krátkého dosahu

pracující v pásmu 2,4 GHz. 2,4 GHz radiový vysílač je slabý a jeho celkový ekvivalentní izotropický vyzařovaný výkon (e.i.r.p.) je vždy nižší než 17 dBm.

Tento přístroj vyhovuje požadavkům mezinárodních norem týkajících se vysokofrekvenčních vysílačů, elektromagnetické slučitelnosti a expozice osob.

Informace o vyhovění požadavkům FCC a ISED je možné najít na zadní straně přístroje.

Značka ACMA  potvrzuje, že zařízení vyhovuje požadavkům norem na elektromagnetické rušení, které jsou vydány Australským úřadem pro komunikace a média (ACMA).



Přístroje se značkou FCC vyhovují požadavkům norem FCC týkajících se elektromagnetického rušení.

Tento digitální přístroj třídy B vyhovuje kanadské normě ICES-003.

Tento přístroj vyhovuje požadavkům uvedeným v části 15 předpisů FCC a RSS, na které se nevztahuje licence ISED.

Při provozu je nutné dodržet následující dvě podmínky:

- Toto zařízení nesmí vyvolávat rušení.
- Toto zařízení se musí být schopno vyrovnat s jakýmkoli rušením včetně rušení, které může vyvolat nežádoucí provozní stavy.

Toto zařízení bylo podrobena zkouškám a bylo shledáno, že ve shodě s částí 15 předpisů FCC vyhovuje mezním hodnotám pro digitální zařízení třídy B. Tyto mezní hodnoty jsou navrženy tak, aby poskytovaly smysluplnou ochranu proti škodlivému rušení při instalaci v prostorech používaných pro obytné účely. Toto zařízení generuje, využívá a může vyzařovat vysokofrekvenční energii, a pokud není instalováno a používáno v souladu s instrukcemi, může způsobovat škodlivé rušení radiové komunikace. Neexistuje však žádná záruka, že se v určité konkrétní instalaci nemůže vyskytnout rušení. Jestliže toto zařízení způsobuje škodlivé rušení rozhlasového nebo televizního příjmu, což může být odhaleno zapnutím a vypnutím zařízení, je uživatel oprávněn pokusit se rušení

odstranit pomocí jednoho nebo i více z následujících opatření:

- Změňte orientaci a umístění přijímací antény.
- Zvětšete oddělovací vzdálenost mezi zařízením a přijímačem.
- Připojte zařízení do zásuvky, která je zapojena na jiný síťový okruh, než je ten, k němuž je zapojen přijímač.
- Obráťte se s prosbou o pomoc na svého prodejce nebo na zkušeného technika v oboru radiového/TV příjmu.

Upozornění FCC: Veškeré změny nebo úpravy provedené bez výslovného schválení stranou odpovídající za to, že zařízení splňuje požadované normy, by mohly mít za následek, že se oprávnění uživatele provozovat toto zařízení stane neplatným.

 **Výrobce z hlediska právních norem**

Signia GmbH

Henri-Dunant-Strasse 100

91058 Erlangen

Německo

Tel.: +49 9131 308 0

Distributor

Sivantos s.r.o.

Molákova 576/11

186 00 Praha 8 - Karlín

Dokument č. 03384-99T01-2D00 CS

Poslední revize 01.2018

© 02.2018, Signia GmbH.

  
0123

**[www.signia-sluchadla.cz](http://www.signia-sluchadla.cz)**